

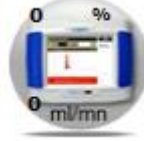
Signification des Icônes Hemabox V2.xx

Sommaire

1. Les Icônes	2
1.1. En cours de séance	2
1.2. En fin de séance.....	5

1. Les Icônes

1.1. En cours de séance

	Accès aux dispositifs médicaux de la séance du patient. Permet d'administrer ou de non administrer un DM prescrit pour la séance en cours et d'ajouter ponctuellement un DM en séance.
	Accès à la saisie du poids d'arrivé du patient
	Accès aux traitements de la séance du patient Permet d'administrer ou de non administrer un traitement prescrit pour la séance en cours et d'ajouter ponctuellement un traitement en séance.
	Accès à la saisie de la température du patient A renseigner quand elle est prise
	Accès à la saisie des glycémies A renseigner quand elle est prise
	Accès à la saisie de la mesure de la recirculation

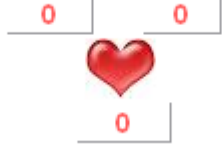
	Accès aux éphémérides et aux 10 dernières anomalies en séance.
	Accès à la saisie d'observations, texte libre.
	Accès à la saisie des anomalies et incidents en séance.
	Calculatrice
	Accès à la saisie de contrôle de traces désinfectant (effectué avant le montage du générateur)
	Accès à la saisie de l'algie
	Accès aux saisies administratives
	Accès à la saisie des apports prescrits au patient

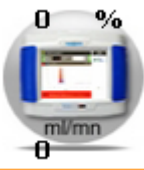
Ech. numerique Traitements Etp	Accès à la saisie dans les onglets virtuels. Onglets virtuels rajoutés au préalable sur Hemadialyse.
TAP    	Accès à la saisie des informations patient : Mode de transport, Infirmier(es), Médecin(s) responsable de la séance, Provenance
 	Remarque : Lorsqu'une pastille verte apparait sous une icône de saisie, cela signifie que la page correspondante à cette icône a déjà été ouverte et que les valeurs ou données ont été renseignées. La pastille orange signifie que seulement une partie des valeurs ou données ont été renseignées. Il faudra alors rouvrir la page pour renseigner les valeurs ou données manquantes.
BIOLOGIE 	Accès à la consultation de la biologie sur les 12 derniers mois
SEANCES 	Accès à la consultation des séances précédentes du patient
PRESCRIPTION 	Accès à la consultation de la prescription du patient

MEDICATION 	Accès à la consultation de tous les traitements du patient : <i>Traitements en séance, généraux, et traitements arrêtés</i>
	Visualisation instantanée des variables du générateur.
  	Accès au tableau de surveillance.
	Visualisation instantanée des constantes du générateur.
	Accès rapide au tableau de surveillance.
	Bouton d'aide. Permet de faire apparaître le nom des icônes.

1.2. En fin de séance

1		Sélectionner l'IDE de débranchement
2	 NaCL 0.9%	Sélectionner le soluté utilisé pour la restitution du patient
3		Renseigner si le patient est algique au débranchement

4		Sélectionner le mode de transport retour du patient
5		Saisir la T° du patient fin de séance
6		Saisir les traitements supplémentaires de fin de séance (horodatés)
7		Sélectionner l'état du dialyseur après la restitution
8		Sélectionner la destination du patient après la séance
9	 D M F	Saisir la glycémie fin de séance
10		Saisir les observations
11		Sélectionner le mode de désinfection effectué sur le générateur de dialyse
12	TA Après Couché   TA Après Debout 	Réaliser la prise de tension du patient via le générateur. Attendre l'affichage des valeurs sur l'Hemabox puis valider en cliquant sur l'icône  ou 

13		Saisir un incident en fin de séance
14		Saisir le poids de sortie
15	 	1) Utiliser le chronomètre pour mesurer le temps de compression 2) Vérifier le temps de compression puis cliquer sur l'icône temps de compression
16		Saisir la mesure de la recirculation